

## Quelles sont les particularités des produits et tondeuses Aesculap ?

### Les tondeuses Aesculap sont :

- très durables, robustes et fiables
- capables de maîtriser les pelages les plus difficiles
- équipées de composants et d'une finition de haute qualité
- fabriquées en Allemagne

### ... et leurs têtes de coupe et peignes offrent les avantages suivants :

- parfaites propriétés de coupe et de tonte
- tenue de coupe longue durée
- réaffûtables jusqu'à 7 fois

- conception et fabrication des machines et têtes de coupe chez Aesculap à Suhl
- savoir-faire dans le domaine de la conception de tondeuses, de têtes de coupe et de jeux de peignes

### Tondeuses Aesculap la qualité fabriquée en Allemagne – depuis 1912

#### Des questions concernant nos tondeuses ?

Nos experts se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions se rapportant aux types de tondeuse, aux peignes et à une utilisation professionnelle des machines.

#### Hotline en France :

+33 (0)3 89 62 15 00

#### E-mail :

support\_tondeuse@kerbl-france.com


Kerbl France Sarl  
3, rue Henri Rouby  
BP 46 - ZI SOULTZ  
68501 Guebwiller cedex - France

www.kerbl.fr

## Têtes de coupe SnapOn les besoins VET

- tenue de coupe longue durée grâce à un acier carbone de haute qualité
- finition de qualité réalisée par les centres CNC d'Aesculap
- toutes les pièces sont fraisées ou profilées, ce qui leur procure une stabilité très grande
- traitement de finition des surfaces haut de gamme pour une protection anticorrosion efficace

### Vous trouverez d'autres têtes de rasage SnapOn sur notre site web.

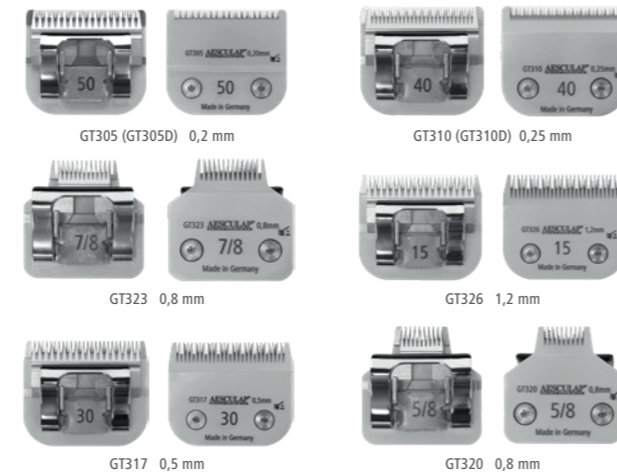

## Têtes de coupe à revêtement DLC

Le revêtement « Diamond Like Carbon » (DLC) d'Aesculap associe, de manière idéale, les propriétés des traitements de surface à base de diamant et de téflon.

Ce revêtement spécial garantit d'excellentes propriétés au produit :

- protection élevée contre l'usure et meilleure durée de vie utile
- excellent glissement grâce à une résistance au frottement minimisée
- tenue de coupe prolongée
- protection anticorrosion accrue
- surface antialissante qui nécessite moins d'entretien
- réduction du dégagement de chaleur



## Remplacement de la tête de coupe

### Pour retirer de la tête de coupe :

1. appuyez sur le bouton-poussoir pour libérer le blocage de la tête de coupe
2. faites pression par l'avant contre la tête de coupe pour la replier en arrière
3. retirez la tête de coupe de la charnière

### Mise en place de la tête de coupe :

4. placez la tête de coupe sur la charnière
5. mettez la machine en marche
6. pousser la tête de coupe en avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche

**Important : la machine doit être en marche pour que le levier de serrage puisse s'enclencher dans la tête de coupe.**

**Un mauvais enclenchement déclenche un bruit de « cliquetis » et la tête de coupe n'offrira pas une qualité de coupe optimale.**



**Conseil pratique : Si la charnière coupe a été rabattue par mégarde, vous pouvez la libérer à l'aide d'un tournevis.**



## Aesculap : Tête de coupe SnapOn en acier inoxydable

**NEW**

Découvrez notre tête de coupe SnapOn fabriquée en acier inoxydable de grande qualité, elle séduit par les propriétés élémentaires de ses matériaux et une tenue de coupe longue durée. Hygiénique, facile à désinfecter et conçue pour une sensation de glissement parfaite, elle permet de tondre sans aucune peine.

- acier inoxydable de haute qualité avec un excellent alliage d'acier
- se nettoie facilement et se prête très bien à la désinfection
- tenue de coupe optimale et de longue durée
- réaffûtage possible jusqu'à 5 fois, pour une utilisation et une efficacité de longue durée



**AESCULAP®**  
CLIPPERS

Qualité allemande depuis 1912



# Durati Vet

tondeuse sans fil Profi pour vétérinaires

## Aesculap Durati Vet

### tondeuse sans fil avec batterie rechargeable pour têtes de coupe SnapOn

La tondeuse sans fil Durati est un produit doté de la qualité éprouvée d'Aesculap. La tondeuse universelle avec le système de tête de coupe courant SnapOn (compatible avec les produits d'autres fabricants comme Heiniger, Oster, Wahl et Andis) se distingue grâce à un excellent rapport qualité/prix. Avec un poids équilibré de seulement 380 grammes, y compris la batterie et la tête de coupe, ainsi que la batterie lithium-ion d'une autonomie de tonte de 4 heures, la Durati offre un plaisir de tonte sans fatigue. Une 2ème batterie est disponible en option et permet de travailler en continu. Tonte sans effort et sans câble gênant !

- Excellent rapport qualité / prix
- Performance Aesculap
- pour la tonte des chiens et petits animaux chez le vétérinaire

#### Particularités :

- durée de fonctionnement sans fil jusqu'à 4 heures
- durée de charge de la batterie : 4 heures
- capacité de la batterie : 2850 mAh
- nouvelle technologie de batteries li-ion (charge rapide et fonctionnement durable)
- Légère : grâce à son faible poids de 380 grammes, tête de coupe et batterie incluses
- très silencieuse : niveau sonore de 63 décibels

Une large gamme de têtes de coupe SnapOn, disponible en option, permet de tondre pratiquement tous les types de pelage avec des hauteurs de tonte jusqu'à 9,5 mm.

#### Le kit GT454-BS comprend :

- 1 tondeuse sans fil Durati VET
- 1 batterie
- 1 chargeur avec fiche universelle pour différents pays
- 1 tête de coupe GT310 #40 (0,25 mm)
- 1 flacon d'huile Aesculap (GT604)
- 1 mode d'emploi



## Têtes de coupe Aesculap SnapOn


### Précision des pros pour les pros !

Les têtes de coupe des tondeuses de la maison Aesculap sont des articles de précision qui visent la perfection. La tête de coupe décide de la performance de toute tondeuse. Les têtes de coupe SnapOn de la forge de métaux Suhl en Thuringe sont de véritables produits « Made-in-Germany ». Outils de coupe de qualité exceptionnelle fabriqués en plusieurs étapes à partir de plaque en carbone de première qualité, conformément aux directives de technique médicale. Hormis pour la trempe, les pièces ne quittent jamais le site de production.

#### Cette fabrication « maison » ne présente que des avantages pour vous :

- **tenue de coupe d'une durée incomparable** grâce à l'acier au carbone de première qualité
- **capacité de coupe élevée et constante** de chaque tête de coupe grâce à des systèmes de d'usinage CNC ultramodernes
- **traitement de finition haut de gamme pour un glissement** extraordinaire au travers du pelage
- **coupe régulière et propre** grâce à une géométrie des dents de conception spéciale
- **possibilité d'un affûtage extrêmement fréquent de jusqu'à 7 fois** grâce à la combinaison de la dureté et de la qualité du matériau et du savoir-faire en matière de fabrication

pression du contre-peigne sur le peigne précise et constante pour un développement de chaleur contrôlé

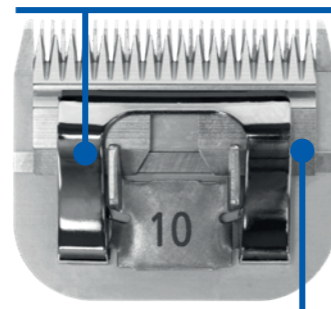

rectification concave de précision pour un meilleur résultat de tonte

géométrie des dents de conception spéciale pour une pénétration précise dans le pelage



traitement de finition haut de gamme pour un glissement extraordinaire au travers du pelage

matériau brut de première qualité pour une longue durée de coupe et jusqu'à 7 affûtages



## Quelle tête de coupe pour quel pelage ?

### Le conseil pour têtes de coupe SnapOn

Il est important d'utiliser la bonne tête de coupe pour chaque type de pelage, ainsi que pour les différentes zones de l'animal. Aesculap propose une large gamme de têtes de coupe SnapOn.

Les indications reposent sur des valeurs indicatives et empiriques, étant donné que les structures du pelage varient d'un animal à l'autre. Nous recommandons d'effectuer une analyse de la structure du pelage avant chaque utilisation de la tondeuse.

Tête de coupe	Désignation	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe	Largeur de tonte	Utilisation / application Races d'animaux	type de pelage	zone corporelle	Application VET
GT305 GT305D	Tête de coupe SnapOn 0,2 mm	50	0,2 mm	40 mm	racés mixtes, chats, lapins	tous les types de pelage	préparation des emplacements d'intervention chirurgicale	ponction veineuse, préparation aux interventions chirurgicales
GT310 GT310D	Tête de coupe SnapOn 0,25 mm	40	0,25 mm	40 mm	racés mixtes, chats, lapins	tous les types de pelage	préparation des emplacements d'intervention chirurgicale	zones de biopsie, préparation aux interventions chirurgicales
GT317	Tête de coupe SnapOn 0,5 mm	30	0,5 mm	40 mm	racés mixtes, chats, lapins	pelage emmêlé	Corps	préparation aux ultrasons
GT320	Tête de coupe SnapOn 0,8 mm	5/8	0,8 mm	20 mm	toutes les races		Tonte des pattes	
GT323	Tête de coupe SnapOn 0,8 mm	7/8	0,8 mm	20 mm	toutes les races		Tonte des pattes	
GT326	Tête de coupe SnapOn 1,2 mm	15	1,2 mm	40 mm	racés mixtes, toutes les races devant être tondues	pelage emmêlé	Corps	préparation aux ultrasons