

## Präzisionsjustierhilfe Torqui

Mit Hilfe des „Drehmomentschlüssel“ Torqui können Sie den Scherkopf für die Favorita kinderleicht einstellen.

- Ultimates Werkzeug für optimalen Schermesserdruck
- Gleichbleibende Schnitthaltigkeit
- Erhöhung der Scherkopf Lebensdauer, da das Zeitintervall zum Nachschleifen vergrößert wird

1. Platzieren Sie die Stifte in die vorgesehenen Löcher auf der Einstell-Schraube
2. Drehen Sie in Uhrzeigerichtung „Klick, klick“ bis der Torqui im Leerlauf läuft

Art. Nr. GT142




## Aesculap Favorita Scherköpfe

### Präzision vom Profi für den Profi!

Diese "inhouse"-Fertigung hat nur Vorteile für Sie:

- unvergleichbar lange Schnitthaltigkeit durch Kohlenstoffstahl erster Güte
- gleichbleibend hohes Schneidvermögen jedes einzelnen Scherkopfes durch modernste CNC-Schleif- und -fräsanlagen
- außerordentliches Fellgleitverhalten durch High-End-Oberflächen-Veredelung
- gleichmäßiges und sauberes Schnittbild durch die eigens entwickelte Zähnegeometrie
- extrem oft bis zu 10 mal nachschleifbar durch die Kombination von Materialhärte, -qualität und Fertigungs-KnowHow

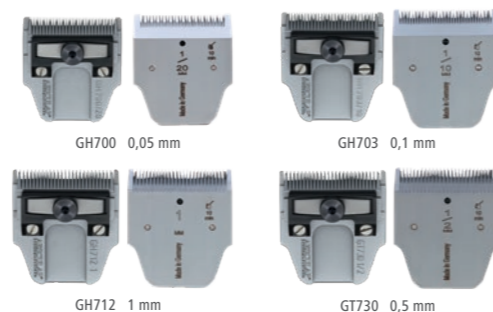

## Aesculap Favorita Scherköpfe mit DLC Beschichtung



Die Aesculap „Diamond Like Carbon“ (DLC)-Beschichtung verknüpft in idealer Weise die Eigenschaftsprofile von Diamant- und Teflon-basierter Oberflächenveredelung.

Diese Spezialbeschichtung garantiert hervorragende Produkteigenschaften:

- hoher Verschleißschutz und längere Lebensdauer
- exzellente Gleitfähigkeit durch minimierten Reibungswiderstand
- verlängerte Schnitthaltigkeit
- erhöhter Korrosionsschutz
- weniger Pflegeaufwand dank schmutzabweisender Oberfläche



Bitte lassen Sie Ihre Scherköpfe und Schermaschinen nur bei den in der Bedienungsanleitung genannten Servicezentren oder einem autorisierten Händler schleifen bzw. reparieren!

## Aesculap Schermaschinen – Qualität aus Deutschland – seit 1912

### Sie haben Fragen zu unseren Schermaschinen?

Unsere Produktexperten beantworten Ihnen gerne alle Fragen zu den Maschinentypen, Schermessern und der professionellen Nutzung der Geräte.


**Hotline Deutschland:**  
+49 8086 933-552

**E-Mail:**  
schermaschinen@kerbl.com

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach  
Deutschland

www.kerbl.com

Präzisions-Hohlschliff für bestes Schurergebnis

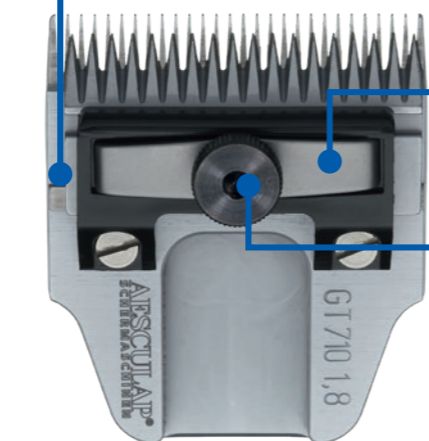

Eigens entwickelte Zähnegeometrie für präzises Eintauchen in das Fell

Favorita-Exklusiv: Plattendruck exakt über die Rändelschraube einstell- und justierbar

Spezieller Schraubenkopf für den Einsatz des Aesculap-Torqui = optimaler Plattendruck

Rohmaterial erster Güte für lange Schnitthaltigkeit und bis zu 10-maliges Nachschleifen



Außerordentliches Fellgleitverhalten durch High-End-Oberflächenveredelung



# Favorita CLi Vet

Akkuschermaschine mit Info-Display

## Aesculap Akkuschermaschine Favorita CLi

### Neueste Generation der kabellosen Favorita

DIE innovative und gewohnt leistungsstarke Akkuschermaschine für den professionellen Einsatz! Über das integrierte „InfoLED Display“ kann man jederzeit den Akku-Ladezustand sowie Öl- und Reinigungshinweise ablesen.

- enorme Durchzugskraft mit 3.300 Hüben, dank hochwertigem bürstenlosen Motor
- Li-Ionen Akkus der neuesten Technologie garantieren extrem lange Einsatzzeiten im Vergleich zum Vorgängermodell
- ergonomisch und perfekt ausbalanciert
- Gewicht von nur 390 g für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ladestation mit LED-Anzeige und Ladeschächten für Maschine und Ersatzakku
- Akkulaufzeit: bis zu 3 Stunden
- Akkuladezeit: 4 Stunden
- Lieferung ohne Scherkopf



#### Favorita InfoLED:

- zeigt bei Bedarf den Akku-Ladezustand bei Berührung - auch im ausgeschalteten Zustand
- situativer Warnhinweis in Form eines Ölkännchens bei Überschreiten des Zeitintervalls beim Ölen
- situativer Warnhinweis falls die Steuerung ein Problem wegen z.B. Überhitzung registriert

#### Sie können zwischen 3 Farb – und 2 Ausstattungsvarianten wählen:

- Blau, rot oder pink
- 1 Akku oder 2 Akkus

GT234-NB inkl. 1 Akku blau  
 GT234-SR inkl. 1 Akku rot  
 GT234-TM inkl. 1 Akku pink  
 GT236-NB inkl. 2 Akku blau  
 GT236-SR inkl. 2 Akku rot  
 GT236-TM inkl. 2 Akku pink



## Welcher Scherkopf für welche Anwendung?

### Der Scherkopfberater für Favorita-Scherköpfe

Wichtig ist für jedes Fell den richtigen Scherkopf zu verwenden; auch für die unterschiedlichen Bereiche am Tier. Eine breite Auswahl von Aesculap Favorita-Scherköpfen steht zur Verfügung.

Diese Angaben sind Richt- und Erfahrungswerte; die Fellstrukturen können bei jedem Tier abweichen. Wir empfehlen eine Analyse der Fellstruktur vor jeder Anwendung mit der Schermaschine.

Scherkopf	Bezeichnung	Größe	Schnitthöhe	Scherbreite	Verwendung/ Anwendung Tierrassen	Fellstruktur	Körperteil	VET Anwendung
GH700 GH700D	Scherkopf Favorita 0,05 mm		0,05 mm	40 mm	Mischrassen, Katzen, Kaninchen	alle Fellstrukturen	Vorbereitung von Operationsstellen	Venenpunktion
GH703 GH703D	Scherkopf Favorita 0,1 mm		0,1 mm	40 mm	Mischrassen, Katzen, Kaninchen	alle Fellstrukturen	Vorbereitung von Operationsstellen	Biopsiebereiche
GT730	Scherkopf Favorita 0,5 mm	#30	0,5 mm	40 mm	Mischrassen, Katzen, Kaninchen	verfilztes Fell	Körper	Ultraschallvorbereitung
GT772	Scherkopf Favorita 0,7 mm	#5/8	0,7 mm	20 mm	alle Rassen		Pfotenschur	
GH712	Scherkopf Favorita 1,0 mm		1,0 mm	40 mm	alle Rassen		Pfotenschur	Ultraschallvorbereitung
GT736	Scherkopf Favorita 1,0 mm		1,0 mm	40 mm	Mischrassen, Pudel, Doodle, Havanaser, Terrier, alle Schneidrassen	verfilztes Fell	Körper	Ultraschallvorbereitung
GT746	Scherkopf Favorita 1,5 mm	#15	1,5 mm	40 mm	Katzen, Kaninchen, Hunderassen mit sehr feinem Fell	verfilztes Fell/ sehr feines Fell	Körper	
GT710	Scherkopf Favorita 1,8 mm	#10	1,8 mm	40 mm	Katzen, Kaninchen, Hunderassen mit sehr feinem Fell	verfilztes Fell/ sehr feines Fell	Körper	
GH715	Scherkopf Favorita 2,0 mm	#9	2,0 mm	40 mm	Mischrassen, Katzen, Kaninchen	verfilztes Fell	Körper	
GT742	Scherkopf Favorita 2,0 mm		2,0 mm	40 mm	Mischrassen, Pudel, Doodle, Havanaser, Terrier, alle Schneidrassen	normale Fellstruktur/ verfilztes Fell	Afterbereich	

## Anwendungsbereiche

### Vollschur



Vollschur bei Kleintieren wie Hunden, Katzen und Kaninchen

### Teilschur



Teilschur bei Großtieren wie Rindern oder Pferden

## Pflegesritte Favorita Scherköpfe

Auf die besonders sorgfältige Reinigung der Zahnücken ist zu achten. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Scherköpfe gründlich zu trocknen, um Korrosion zu verhindern. Nach dem Reinigen sind die Scherköpfe einzuölen. Verwenden Sie ausschließlich original Aesculap Schermaschinen-Öl GT604.



Demontieren



Reinigen



Trocknen



Ölen

Die Schermesser sind vor jeder Benutzung bei montiertem Scherkopf einzuölen!

Während der Arbeit ist alle 5-10 Minuten zu ölen. Dazu wird das spezielle Schermaschinenöl mit 3 Tropfen auf die Zähne und mit 2 Tropfen zwischen die Zähne gegeben.



Nach dem Ölen lässt man die Maschine einige Sekunden im Leerlauf laufen, damit sich das Öl gut verteilen kann und nicht auf das Haar des Tieres übertragen wird. Mit der richtigen Wartung und Pflege kann die Haltbarkeit der Scherköpfe bis zu 20 % erhöht werden.

Auch das Nachschleifen kann verzögert werden.



Für das Reinigen, Kühlen und Ölen empfehlen wir unser BladeCool GTA103.